

# Surgical Plume Evacuation Pencil

Med en inbyggd teleskopfunktion som tillhandahåller en lösning efter önskat behov för både djupa och ytliga incisioner



Operationspersonalen är i riskzonen varje gång kirurgisk rök skapas i operationssalen. Lösningen ligger i dina händer med nya Mölnlyckes diatermipenna, förlängningsbar med integrerat rökutsug, en utmärkt lösning som säkerställer minimerad rökexponering och tydlig visualisering av operationsområdet. Sätter din och dina patienters säkerhet i första hand.

- En unik och lätt allt-i-ett konstruktion med en inbyggd teleskopfunktion som tillhandahåller en lösning efter önskat behov för både djupa och ytliga incisioner.
- Mölnlyckes diatermipenna med integrerat rökutsug erbjuder en hållbar lösning, fri från DEHP och PVC.
- Mycket hög sugkapacitet (95 l/min) minimerar rökexponeringen och ger snabb visualisering av operationsområdet.
- Finns både för dina skräddarsydda kundanpassade set och som enstycksförpackad.


# Teknisk data

Val av elektroder:

Rostfritt stål **1** för snabba, enkla ingrepp.

Belagd med PTFE **2** för minskat behov av rengöring under ingreppet.

Isolerad och belagd med PTFE **3** för minskad risk för oavsiktlig vävnadsskada vid användning i trånga utrymmen.

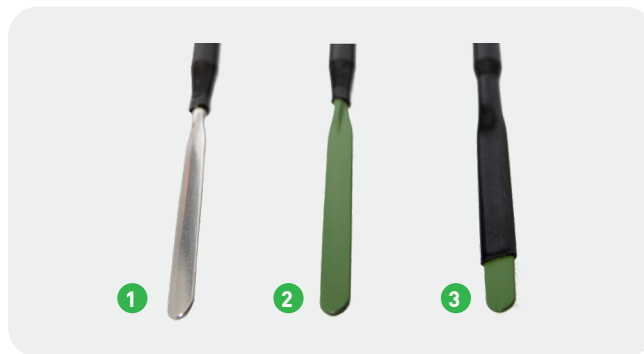

360° roterbart (svivel) handtag ger rörelsefrihet och minskar risken för handledsutmattnig

22mm universalanslutning som passar alla rökutsugsmaskiner

Smal diameter säkerställer exakt kontroll och bättre visualisering, särskilt i trånga utrymmen

Längd 4 meter kabel

## Beställningsinformation (enstycksförpackad)

Art. nr.	Produktnamn och beskrivning	Avd./Trp.
420100-00	Diatermipenna med integrerat rökutsug, PTFE belagd elektrod	20 / 40
420101-00	Diatermipenna med integrerat rökutsug, PTFE belagd elektrod, isolerad	20 / 40
420102-00	Diatermipenna med integrerat rökutsug, SS elektrod	20 / 40

## Artikelnummer för kundanpassade set

Art. nr.	Produktnamn och beskrivning
2325334-00	Diatermipenna med integrerat rökutsug, PTFE belagd elektrod
2325352-00	Diatermipenna med integrerat rökutsug, PTFE belagd elektrod, isolerad
2325353-00	Diatermipenna med integrerat rökutsug, SS elektrod

Läs mer på [molnlycke.se](https://molnlycke.se)

Molnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sverige. Telefon 031 722 30 00. Molnlycke, BARRIER och ProcedurePak varumärken, namn och logotyper är registrerade globalt hos ett eller flera av Molnlycke Health Care-koncernen. ©2024 Molnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU1582407