

Verres nål

Truly customised laparoscopic solutions




Veress nål är ett sterilt engångsinstrument för att skapa pneumoperitoneum vid laparoskopiska ingrepp.

- Vass, slipad spets för enkel punktion genom bukväggen
- Transparent handtag med tydlig röd visuell indikator
- Fjädrande spets som avger ett känn- och hörbart klick för korrekt placering
- Trubbig hylsa som skyddar nålspetsen när korrekt positionering uppnåtts
- Vridbar kran med luer lock-koppling för anslutning till insufflationsslangen
- Finns i två längder – 120mm och 150mm
- Trubbig spets med distal insufflationskanal för kontrollerad insufflation.
- Finns både för dina skräddarsydda kundanpassade set och som enstycksförpackad



Verres nålspets

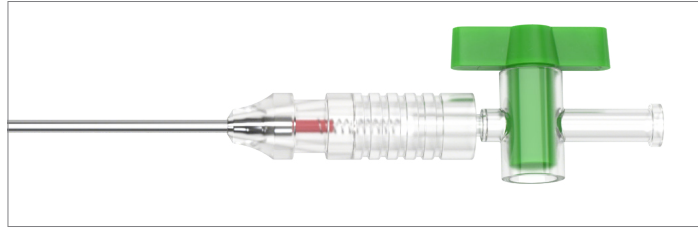

Verres nålkropp

Art nr.	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
899105	Verres nål	12cm	25
899106	Verres nål	15cm	25

Juridisk tillverkare: Unimax Medical Systems Inc.
Importerat och distribuerat av: Mölnlycke Health Care AB

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sverige. Telefon 031-722 30 00
Mölnlyckes varumärke, namn och logotyp är registrerat globalt till ett eller flera av Mölnlycke Health Care -företagsgruppen.
© 2021 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.