



Mölnlycke® Laparoskopiskt sug- och spolset

Truly customised laparoscopic solutions

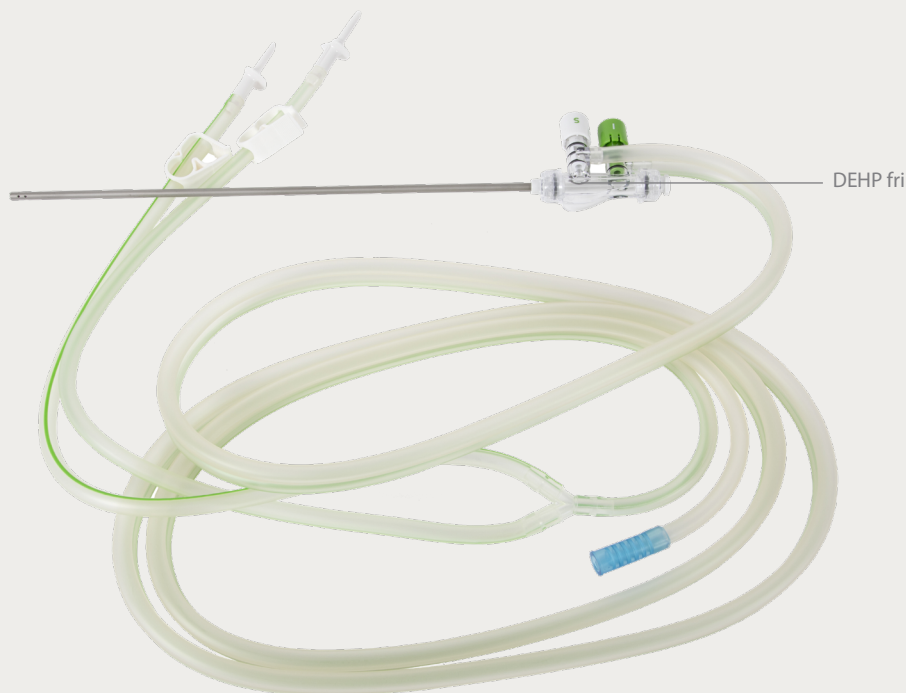

Mölnlycke® laparoskopiskt sug- och spolset designat för effektiv och enkel aspiration och/eller spolning under laparoskopiska ingrepp. Det hjälper till att hålla bukhålan fri från vätskor och blod.

- Sug- och spolhandtaget kan hanteras med endera handen
- Transparent sug- och spolhandtag för fri sikt
- Mjuk DEHP-fri slang samt enkel avskiljning av sug-spolslang
- Finns i två längder - 33cm och 45cm
- Dubbel spike
- Färgkodade och textmarkerade knappar för tydlig identifikation av sug- och spolfunktion
- Proximal spolning förhindrar stopp
- Passar tillsammans med Mölnlyckes 10mm/33cm och 5mm/45cm sug-och spolmunstycke
- Matt skaft minimerar bländning och reflektion
- Distala laterala hål och en atraumatisk tipp för att förhindra skador på vävnad
- Finns både för dina skräddarsydda kundanpassade set och som enstycksförpackad.

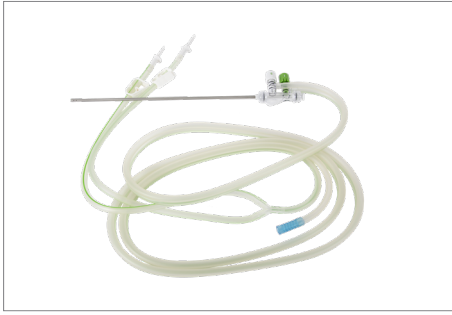

Sug- och spolset



Sug och spol – spolhandtag



Sug- och spolmunstycken



Beställningsinformation

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Avd. förp.
899107	Sug- och spolset, dubbel spike	5mm	33cm	10 st*
899108	Sug- och spolset, dubbel spike	5mm	45cm	10 st*
899109	Sug- och spolmunstycke	10mm	33cm	10 st
899113	Sug- och spolmunstycke	5mm	45cm	10 st

* minsta beställningsenhet 20 st.

Juridisk tillverkare: Unimax Medical Systems Inc.
Importerat och distribuerat av: Mölnlycke Health Care AB

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sverige. Telefon 031-722 30 00
Mölnlycke och ProcedurePak varumärken, namn och logotyper är registrerade globalt hos en eller flera av Mölnlycke Health Care
grupp av företag. © 2023 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. SESU1352311


Mölnlycke[®]